


dexcomG6

START HER

Opsæt

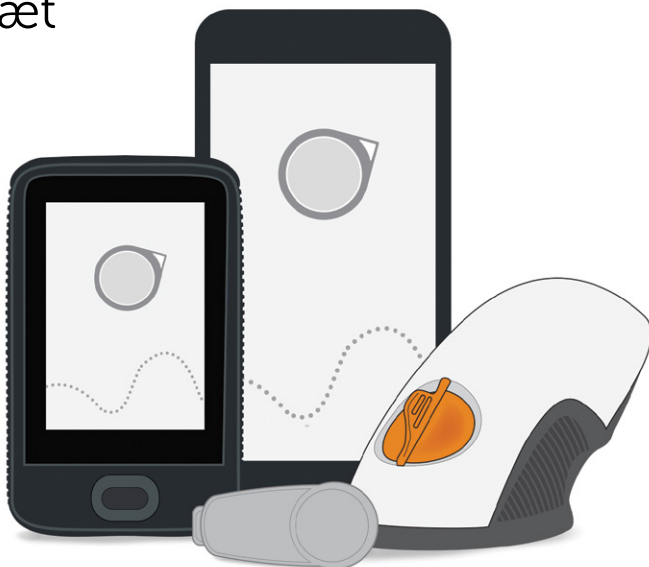


Brugervejledning

Oversigt over Dexcom G6 CGM (G6)

Skærmenhed

- Viser glukoseoplysninger
- Konfigurerer din smartenhed, Dexcom-modtager eller begge
- Du kan se en liste over smartenheder og operativsystemer, der i øjeblikket er kompatible, på: dexcom.com/compatibility
- G6-appen og modtageren er kompatibel med alle G6-systemer

Din smartenhed




Dexcom-modtager




Applikator med indbygget sensor

- Sensorapplikatoren indfører sensoren under din hud
- Sensoren henter glukoseoplysninger

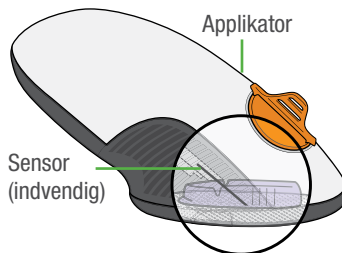

Sender

- Sender glukoseoplysninger fra sensoren til skærmenheden

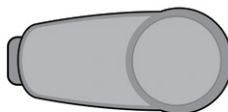

Alle tegninger er illustrative. Dit produkt kan se anderledes ud.

Gennemgå sikkerhedserklæringen *Sådan bruger du din G6, kapitel 2*, før du bruger din G6.

Enhedens funktion

G6 sender glukoseoplysninger (G6-aflæsninger) til din skærmenhed.



Vælg App, Modtager eller Begge


Modtageren er dedikeret medicinsk udstyr. Det er smartenheden ikke, selvom G6-appen kan køres derpå. Din smartenhed er ikke dedikeret medicinsk udstyr, da appen kan overse en alarm/advisering, fordi den ligger på en smartenhed – det kan f.eks. ske på grund af smartenhedens indstillinger, at smartenheden eller appen lukker, eller på grund af lav batterispænding.

Brug fanerne herunder til at konfigurere appen, modtageren eller begge

Vil du opsætte begge? Vælg én, der skal opsættes først, og gå til den pågældende fane. Det sidste trin viser, hvordan du opsætter den anden skærmenhed. Brug ikke begge faner.

Andre måder, hvorpå du kan lære, hvordan du opsætter din G6:

- Se vejledningen på: dexcom.com/downloadsandguides
- Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant for at få hjælp




Din smartenhed




Dexcom-modtager



Din smartenhed

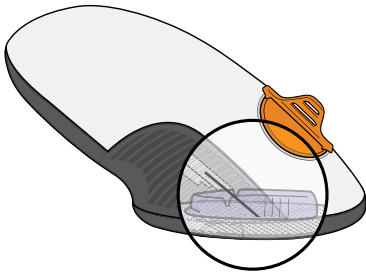

Applikator med
indbygget sensor

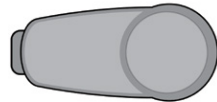

Sender

Trin 1: Opsæt appen



A Download og åbn Dexcom G6-appen




B Følg opsætningsvejledningen på skærmen

1 Når du bliver bedt om det:

- Send dine data til skyen.
Dette giver dig mulighed for at bruge:
 - Del: Send dine G6-data til følgere.
 - KLARHED: Tal med læger om dataene; se mønstre (muligvis ikke tilgængeligt i alle områder).
- Indtast sensorkoden
(fra den sensorapplikator, du vil indføre).
 - Ingen sensorkode?
Se *Sådan bruger du din G6, Bilag A Fejlfinding*.

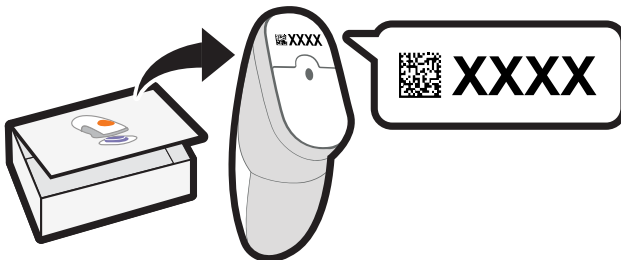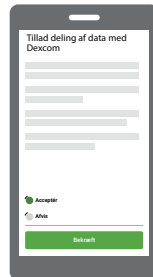

- Indtast dit serienummer (SN) fra:

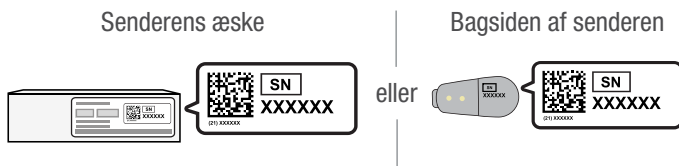

Når du har indtastet dit serienummer, søger G6 efter senderen. Under søgningen modtager du ingen G6-aflæsninger eller alarmer/adviseringer.

- 2** Kan du se den blå timer for sensoropvarmning?
Det betyder, at sensoren er ved at vænne sig til din krop.


Under opvarmning:

- Ingen G6-aflæsninger eller alarmer/adviseringer
- Hold altid smartenheden inden for en afstand af 6 meter fra senderen



C Vent 2 timer


- Når sensoren er varmet op, skal du trykke på **OK** for at få vist startskærmen
- Nu kan du modtage G6-aflæsninger og advarsler/adviseringer

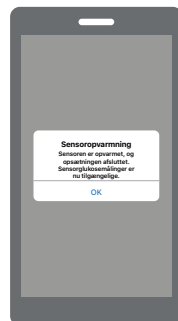

Trin 2: Se Sådan bruger du din G6

Lær, hvordan du:

- Læser startside
- Bruger alarmer og advarslinger
- Træffer beslutninger vedrørende behandling
- Foretager fejlfinding af problemer

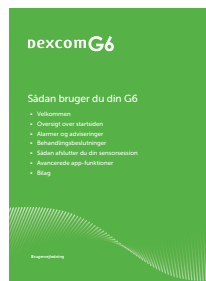


Trin 3: Valgfrit – Opsæt modtager


Tænd for modtageren ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 2-3 sekunder. Følg derefter instruktionerne på skærmen.

Brug ikke fanen Konfigurer modtager. Trinnene på denne fane er til opsætning af modtageren før opsætning af appen.




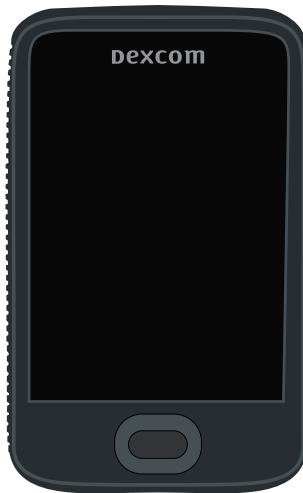

Modtager

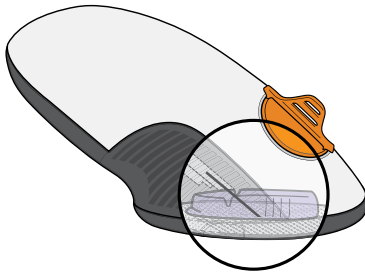

Applikator med
indbygget sensor

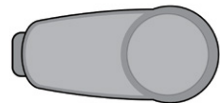

Sender

Opsæt modtager

Trin 1: Opsæt modtager

A Tag modtageren ud af æsken




B Tænd for modtageren

Tryk på tænd/sluk-knappen i 2-3 sekunder.




C Følg instruktionerne på skærmen

- 1 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste din:
 - Sensorkode fra den sensorapplikator, du vil indføre
 - Ingen sensorkode?
Se *Sådan bruger du din G6, Bilag A Fejlfinding.*

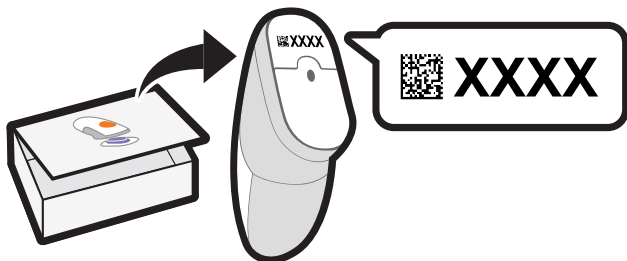


- Serienummer (SN) fra:

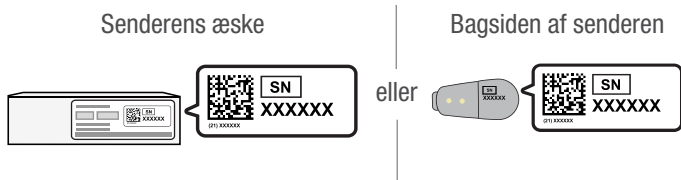

Når du har indtastet dit serienummer, søger G6 efter senderen. Under søgningen modtager du ingen G6-aflæsninger eller alarmer/adviseringer.


- 2** Du har fuldført trinnet, når du får vist følgende skærbillede:

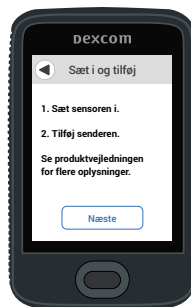

Trin 2: Brug applikatoren til at indføre indbygget sensor

A Tag applikatoren med indbygget sensor ud af æsken

Indsaml materiale: applikator (med den netop indtastede kode), sender og servietter.

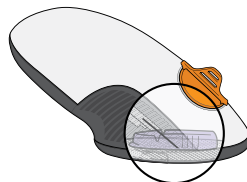


B Vælg sensorsted

2 år og derover

ELLER


Kun 2-17 år

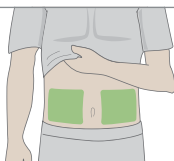


Undgå knogler, irriteret hud, tatoveringer og bulede områder.

C Brug applikatoren til at indføre indbygget sensor


1 Tag sensorapplikatoren og en spritserviet.

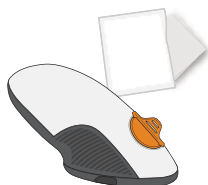


2 Vask og tør hænderne.

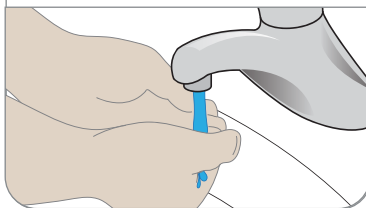


- 3** Rengør sensorstedet med en spritserviet.

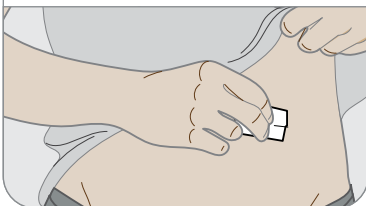


- 4** Fjern den klæbende bagbeklædning. Rør ikke ved klæbestykket.

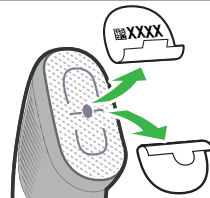


- 5** Anbring applikatoren på huden.

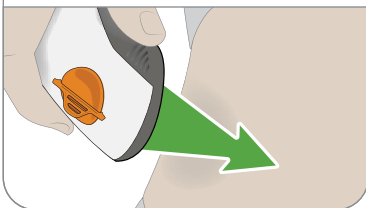


- 6** Fold sikkerhedsafskærmningen, og bræk den af.

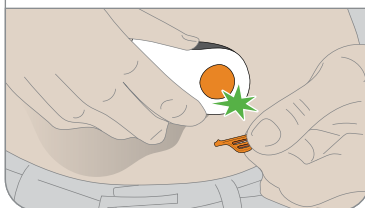


- 7** Tryk på knappen for at indføre sensoren.

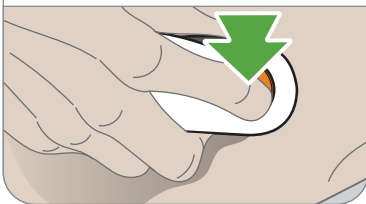

- 8** Fjern applikatoren fra huden, og lad plaster og holder blive siddende.

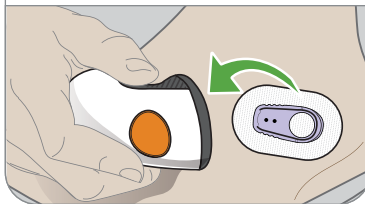


- 9** Kassér applikatoren. Følg de lokale regler for komponenter, der har været i kontakt med blod.

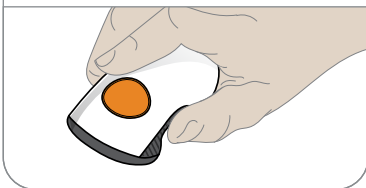


Trin 3: Fastgør sender

A Tag senderen ud af æsken

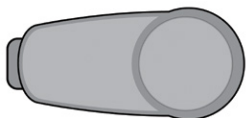


B Tryk senderen ind


- 1** Rengør senderen med en spritserviet.

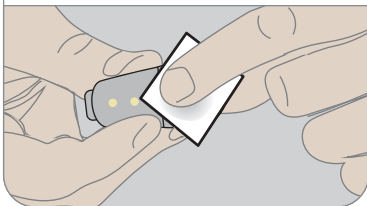


- 2** Indfør senderen i holderen med den brede ende først.

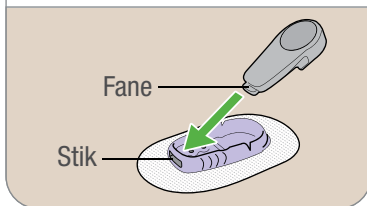

- 3** Tryk senderen ind. Den klikker på plads. Sørg for, at den ligger fladt og sikkert i holderen.

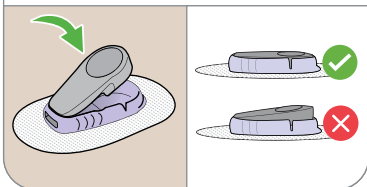

- 4** Gnid 3 gange rundt på plasteret.

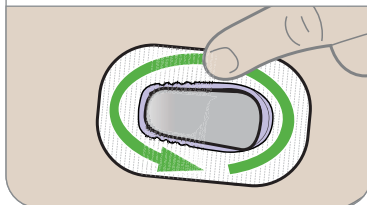

Trin 4: Start sensoren på modtageren

A Kobling mellem de 2 kan tage op til 30 minutter

Under parring:

- Ingen G6-aflæsninger eller alarmer/adviseringer
- Hold altid modtageren inden for en afstand af 6 meter fra senderen



B Tryk på Start sensor for at påbegynde sensoropvarmningen

Under opvarmningen modtager du ingen G6-aflæsninger eller alarmer/adviseringer



C Vent


- Tryk på **Næste** for at gå til startside, når opvarmningen er afsluttet
- Nu kan du modtage G6-aflæsninger og advarsler/adviseringer



Trin 5: Se *Sådan bruger du din G6*

Lær, hvordan du:

- Læser startside
- Bruger alarmer og advarsler
- Træffer beslutninger vedrørende behandling
- Foretager fejlfinding af problemer

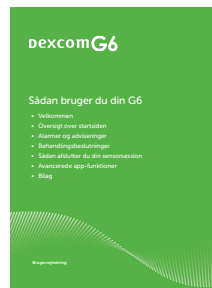

Trin 6: Valgfrit – Opsæt app

Download appen på din smartenhed, og åbn den. Følg derefter instruktionerne på skærmen.

Brug ikke fanen Konfigurer app. Trinnene på denne fane er til opsætning af appen før opsætning af modtageren.





© 2019 Dexcom, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dækket af patenter dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom Share, Dexcom Care, Dexcom Clarity og Share er registrerede varemærker tilhørende Dexcom, Inc. i USA og kan være det i andre lande.

Dexcom



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200
dexcom.com

Uden for USA: Kontakt din
lokale Dexcom-repræsentant



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

