

Dexcom G7

Deling til klinik via glooko



TRE VIGTIGE TRIN DU SKAL GØRE NÅR DU STARTER DIN DEXCOM G7



Det er let at starte Dexcom. Her hjælper vi dig med 3 små men vigtige trin inden du kan starte din første sensor.

Når du er kommet godt i gang med din Dexcom G7, kan du dele dine CGM-data med din klinik. Det gør det lettere at få rådgivning fra din behandler, baseret på dine opdaterede data. Denne brochure viser dig hvordan.


Spørg din behandler om du skal starte Dexcom G7 ved et digitalt eller et fysisk møde.

Dexcom G7-appen fungerer på de fleste mobiltelefoner! Her kan du tjekke om din telefon er kompatibel:
www.dexcom.com/compatibility



Trin 1

Hent apps

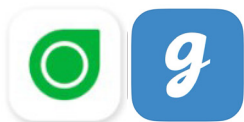

Trin 2

Lav konto og
log ind i
Dexcom og
Glooko

- (1) Hent appen Dexcom G7 fra App Store eller Google Play
 - (2) Hent appen Glooko fra App Store eller Google Play. Alternativt kan du gå ind på hjemmesiden my.glooko.com i næste trin
-
- (1) I Dexcom G7-appen: følg instruktionerne for at lave en ny konto. Hvis du allerede har en Dexcom-konto, logger du bare ind med dit brugernavn og password.
 - (2) I Glooko-appen eller på hjemmesiden my.glooko.com: følg instruktionerne for at lave en ny konto. Hvis du allerede har en Glooko-konto, logger du bare ind med dit brugernavn og password
 - (3) Skriv dine kontooplysninger ned på et sikkert sted, så du kan logge ind og bruge en anden mobiltelefon, hvis behovet opstår.

Nu er du klar til at starte din første Dexcom G7-sensor!



Brugere under 18 år behøver en myndig pårørende med Dexcom-konto. Følg instruktionerne for at lave en almindelig Dexcom-konto for den myndige på den myndiges telefon. Lav dernæst en ny konto for umyndige på samme telefon. Afslut ved at logge ind med den umyndige brugers kontooplysninger på dennes telefon.

Trin 3

Kobl
Dexcom-konto
til
Glooko-konto

Del dine
glukose-
værdier med
din klinik

Du skal bruge en
ProConnect-kode
fra din klinik.



Kontakt klinikken
hvis du ikke har fået
den.

Via Glooko-appen

- (1) Gå til "Synkroniser enhed" og klik på "Tilføj ny enhed"
- (2) Vælg "Kontinuerlige glukosemonitører" og derefter "Dexcom"
- (3) Angiv dit brugernavn og password til Dexcom-kontoen. Følg instruktionerne.

Via my.glooko.com

- (1) Klik på "Enheder" og vælg "Tilføj enhed"
- (2) Vælg "Blodglukoseenheder" og "Kontinuerlig glukosemonitorering"; scroll ned og vælg "Dexcom" og klik på "Opret forbindelse"
- (3) Angiv dit brugernavn og password til Dexcom-kontoen. Følg instruktionerne.

Via Glooko-appen

- (1) Klik på person-ikonet øverst til højre og klik på "Profil"
- (2) Klik på "ProConnect" og klik på "Tilføj plejeteam". Angiv koden og bekræft.
- (3) Du får en bekræftelsesmeddelelse på mail.

Via my.glooko.com

- (1) Klik på cirklen med dine øverst til højre og klik på "Indstillinger"
- (2) Scroll ned til "Konto" og "ProConnect-kode"/stjernen med "Primær udbyder" og klik på "Tilføj ny kode". Angiv koden og bekræft.
- (3) Du får en bekræftelsesmeddelelse på mail.

Dexcom G7

Hvis du skal bruge Følgerfunktionen

Med Dexcom G7 kan du nemt dele dine glukoseværdier, for eksempel med en ven/forælder/partner som kan være en støtte og give ekstra tryghed.

Dexcom G7-brugeren

- (1) Gå til Forbindelser i bunden af skærmen og klik på "Share"
- (2) Klik på "Inviter følger". Angiv følgerens navn og mailadresse og vælg hvad du vil dele. Brug kun mailadresser som kan åbnes på følgerens mobiltelefon

Følgeren

- (1) Hent Dexcom Follow-appen fra App Store eller Google Play
- (2) Følg instruktionerne i mailen du modtager. Kontroller dit spam-filter/uønsket mail hvis du ikke kan finde mailen.
- (3) Indstil de adviseringer, du vil have.

Kontakt vores support ved behov!

Se åbningstider på vores hjemmeside:
diabetesinfucare.com

Telefon: 70 28 10 24

E-mail: diabetessupport@infucare.dk

Du kan også komme i kontakt med os ved at udfylde vores kontaktformular på makingdiabeteseasier.com/dk/kontakt-os.

?



God fornøjelse
med Dexcom G7